

SKG E7-EN Szemmasszírozó

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy a SKG terméket választotta!

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne használja a készüléket smink használata után. Ez tönkreteszheti a simnket és beszennyezi a készülék érintkező részeit. Ilyen esetben tiszta vízzel törölje át a szennyezett területet.
- Nem javasolt a készülék használata közvetlenül folyadék bevitele után.
- A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy nem visel kontaktlencsét és távolítsa el a hajtűket, hajdíszeket, stb.
- Ne használja a készüléket naponta két alkalomnál többször.
- Ne használja a készüléket a következő egészségügyi készülékekkel együtt:
 - Beültetett szívritmus-szabályzó vagy egyéb beültethető egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Mesterséges szív vagy tüdő vagy egyéb élet-fenntartó egészségügyi elektronikai eszköz.
 - EKG és egyéb egészségügyi elektronikai eszköz.
 - Benzinkutak, magas portartalmú üzemek, gáz és egyéb gyúlékony, robbanásveszélyes területen.
- Ne használja a készüléket vezetés, hegymászás vagy egyéb veszélyes tevékenység közben, mert balesetet okozhat.
- Ha a felhasználó magas frekvenciájú sebészeti eszközt és a készüléket egyszerre használja, a testén az elektródák helyén égési nyomok keletkezhetnek és egyéb károkat okozhatnak a készülékben.
- Ha a készüléket rövidhullámú mikrohullámú terápiás eszköz közelében (1m) használja, a termék kimenete instabil lehet.
- A kezelés alatt kerülje, hogy az elektródák sebekkel és sérülésekkel érintkezzenek.
- A készülék használata csak egy személy részére javasolt. Ha több személy használja, tisztítsa meg az elektródákat új személy általi használat előtt.
- Ha más személyre helyezi át a készüléket vagy arrébb helyezi az elektródákat masszázs közben, ellenőrizze, hogy a tápcsatlakozást eltávolította, különben elektromos áramütés érheti.
- Használat során az elektródák szorosan érintkezzenek a bőrfelülettel a megfelelő hatékonysághoz.
- Ne használja a melegítő funkciót hosszú időn át (több, mint 20 perc), mert alacsony hőmérsékletű égést okozhat.
- Ha a használat során vagy után kellemetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát és forduljon egészségügyi szakemberhez.
- Az alábbi esetekben forduljon orvosához a termék használatba vétele előtt, különben balesetet vagy fizikai kényelmetlenséget okozhat:
 - Egészségügyi kezelés alatt álló és kényelmetlen érzéssel rendelkező páciens
 - Rozsdamentes acél elektródákra allergiás betegek
 - Rendellenes szív és idegrendszerrel rendelkező páciens
 - 38 fokos testhőmérséklet felett (láz esetén)
 - Fertőző betegség esetén
 - Bőrérzékenység vagy egyéb bőr rendellenesség esetén
 - Gyógyszeres kezelés alatt álló páciens
 - Korlátozott cselekvő képesség esetén
 - A magas perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékszervi károsodásban szenvedő betegek.

- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket:
 - Sztrók, magas vagy alacsony vérnyomás esetén
 - Szemműtét és szívbetegség esetén
 - Rosszindulatú daganat esetén
 - Szembetegséges esetén, pl: zöldhályog, szürkehályog, retina leválás, és vörös szem
 - Vérzékenység esetén
 - Véralvadási rendellenesség esetén
 - Állapotos és menstruációs periódusban lévő nők és gyermekek
 - Akut váladékkal járó gyulladós megbetegedés esetén
 - Szívritmus-szabályzóval rendelkező betegek esetén
 - Görcsös bénulás esetén
 - Fél órán belül étkezés után.
 - Rendellenes idegrendszeri stressz esetén
 - Cerebrovaszkuláris balesetet követő görcsös fázisban lévő egyének
 - Tisztázatlan tudatállapotú egyének, valamint végtag- és ízületi kontraktúras deformitások.
 - A készüléket ne használja a derék alatt vagy a has alsó részén a terhesség kezdeti szakaszában.
 - Fém implantátummal rendelkezők esetén
 - Súlyos kognitív károsodás esetén
 - Szív közelében
 - A szemén
 - Keringési rendellenességek, pl agyi érbetegségek, gyulladt vagy duzzadt bőr a nyakon, gennyesedés nyakkal kapcsolatos rendelleneségek esetén, mert súlyosbíthatja az állapotot.
 - 70 év feletti nem használhatják a készüléket. 65 év feletti alacsonyabb fokozaton használják csak a készüléket és figyeljenek a használati időtartamra, mert a bőrük kényesebb és az idegvégződéseik érzéketlenebbek lehetnek.
- Fokozatosan emelje a masszázs erősségét a személyi komfortérzetnek megfelelően, mert a túl erős fokozattól izomláz okozta kellemetlen érzése támadhat.
- Ne használja a szív közelében, a nyak felett, fejen, szájon, genitáliákon, bőr rendellenességen, valamint a talpakon egyszerre. Továbbá ne nyomja a belső szerveket a használat során.
- Ne használja zsigeri szervek nyomására. Nem megfelelő használat balesetet és fizikai kényelmetlenséget okozhat.
- Ne használja együtt más egészségügyi termékkel vagy két terméknel többet egy időben.
- Ne használja sérült vagy repedezett felületen.
- Ne helyezze az elektródákat a koponyacsont közelébe, ha a beteg korábban agyi érrendszeri balesetet szenvedett.
- A készülék hőtermelő felülettel rendelkezik. Hőre érzékenyek óvatosan használják.
- A készülék megfelel az FCC szabályzat 15. pontjának. Nem okoz sérülést okozó interferenciát. Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve azokat az interferenciákat, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását okozhatják.
- Használja a készüléket normál hőmérsékleten (0°C és 40°C között), 85% páratartalom alatt és 50 kPa és 106 kPa légnyomás között
- A készüléket és a tartozékait tárolja -20°C és +55°C közötti hőmérsékleten, 95% páratartalom alatt és 50 kPa és 106 kPa légnyomás alatt. Ne tegye ki tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék elektromos hálózatra történő csatlakoztatása után azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzesetek megelőzése érdekében!

- Tűz-, és balesetveszély elkerülése érdekében ellenőrizze használat előtt, hogy az akkumulátor és a töltő nem sérült-e. Ne használja a készüléket ha a töltő vagy az akkumulátor sérült.
- A készülék nem játék! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati kábelt.
- Védje a hálózati kábelt. Vezesse úgy, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Húzza ki a kábelt a fali aljzatból, amennyiben huzamosabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét, a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülékben.
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülék nyílásaiba, ne használja a készüléket bármelyik nyílás eltömődése esetén. Tartsa por, szősz, haj és egyéb tárgytól távol, amelyek akadályozhatják a légáramlást.
- Ezt a terméket gyermekek, szellemileg-, vagy fizikailag korlátozott személy nem használhatja. A készülék karbantartását és tisztítását gyermekek nem végezhetik.
- Ne nyúljon a mozgó alkatrészekhez, és tartsa távol a haját és a ruházatát is tőlük.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és távolítsa el a tápkábelt a konnektorból.
- Ne vágja szét, ne javítsa és ne módosítsa a készüléket vagy a tartozékokat.
- Ne érintse meg a töltőt vagy a készülék bármely részét nedves kézzel.
- A készüléket mindig tartsa távol a hőforrásoktól (pl. radiátor, fűtőtest).
- Megfelelően kezelje az akkumulátort – veszélyes hulladéknak számít!
- Ha az akkumulátor nincs használatban, tartsa távol fém tárgyaktól, pl irattartó kapocs, pénzérme, kulcs, szögek vagy csavarok. Az akkumulátor érintkezőinek összezárása tűz és égés kockázatát rejti.
- Amennyiben a tápkábel, az adapter vagy az akkumulátor megsérül, feltétlenül ki kell azt cserélni. Ne üzemeltesse így a készüléket.
- Sérülékeny feltételek esetén folyadék szivároghat az akkumulátorból. Kerülje az érintkezést, mert bőrirritációt okozhat. Ha ez előfordul, öblítse le vízzel a bőrét. Ha a folyadék szembe kerül, kérjen orvosi segítséget.
- Szállítás előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék. Javasoljuk az eredeti csomagolás megtartását.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy legalább 90 naponként töltsen fel teljesen az akkumulátort.
- NE dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat tűzbe, mert robbanásveszélyes.
- NE merítse vagy dobja az akkumulátort vagy a készüléket és tartozékokat bármilyen vízbe, sós vízbe vagy folyadékba.

Megjegyzések:

- Ha kényelmetlenséget vagy rendellenességet tapasztal a termék használata során, hagyja abba a termék használatát azonnal!
- Ha a testen vagy bőrén furcsa érzést tapasztal, konzultáljon orvosával és kövesse az orvos utasításait.

- Ha készüléket használat közben más személyre helyezi, ellenőrizze, hogy az áthelyezés előtt a készüléket kikapcsolta.
- Ne használja elektronikai eszközök viselése közben.
- Ha rendellenes működést tapasztal, kapcsolja ki a készüléket és vegye le.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki az USB kábelt nedves kézzel.
- Ne használja magas páratartalmú helységben (pl. fürdőszoba) vagy fürdés közben.
- Ne használja alvás közben vagy öntudatlan állapotú személyen.
- Melegre érzékenyek használják alacsony fokozaton és szigorúan figyeljenek oda a használati időtartamra.
- Ne használja hosszú ideig egy területen (több, mint 30 percig).
- Masszázs közben ne érintkezzenek az elektródák övek, nyakláncok, stb. fém felületeivel.
- Viselje megfelelően a készüléket a nyaki gerincen.
- Az USB kábel eltávolításakor ne csak a kábelt húzza, hanem a csatlakozó végénél fogja meg a kábelt.
- Hosszabb idejű használat esetén a felület felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Ellenőrizze, hogy a gomb megfelelően működik.
- Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után, töltsse fel az akkumulátort.
- Ha nem használja tovább a terméket figyeljen oda a helyi hulladék-kezelési szabályok betartására.
- A készülék egy személyi masszázs termék és nem helyettesít gyógyszereket vagy egészségügyi eszközöket.
- Ne használja a szem körüli területen kívül más testrészen.
- Használata 16 éves kor felett javasolt.

Ne tárolja vagy használja a készüléket az alábbi körülmények esetén:

- Közvetlen napfény
- Erős elektromágneses sugárzás
- Forró és párás helyen
- Vibrálásra és rázásra érzékeny helyeken
- Víz közelében
- Tűz közelében
- Nagy portartalmú helységben

JELLEMZŐK

| | |
|----------------------|--------------------|
| Modell: | S1511HB |
| Teljesítmény: | 5W |
| Névleges feszültség: | 5V |
| Akkumulátor: | 1500 mAh / 5,55 Wh |

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

DOBOZ TARTALMA

- SKG E7-EN szemmasszírozó
- USB kábel
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

SKG Health Technologies Co., Ltd.

Address: 23A Floor, Building 3, Zhongke R&D Park, No. 009, Gaoxin South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2024 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.

IMPORTŐR:

WayteQ


WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Tel.: (+36-1) 445-1222


Email: info@wayteq.eu | Web: wayteq.eu mstore.hu

KEZELŐSZERVEK

Előlnézet

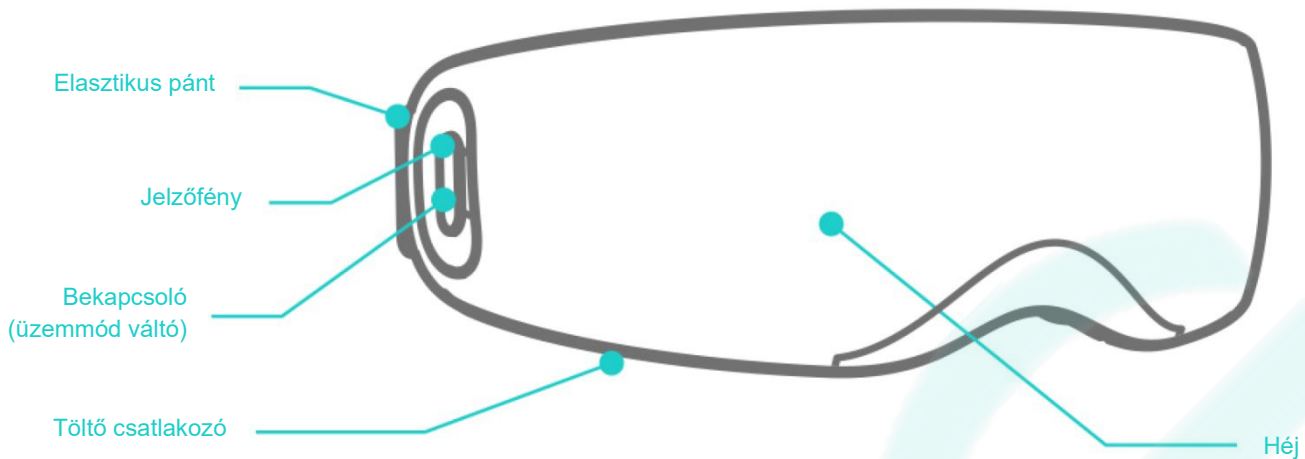

Hátul nézet

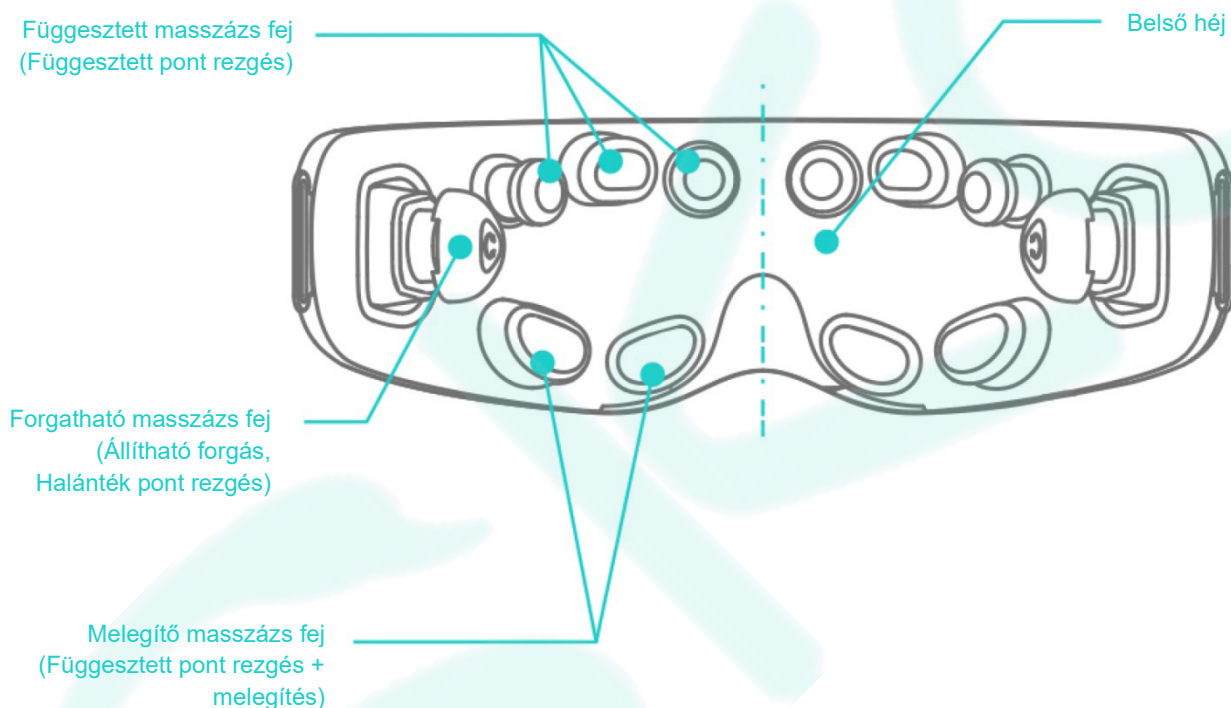

HASZNÁLAT

Megjegyzés: Mielőtt használatba veszi a terméket állítsa be megfelelően az elasztikus pántot megfelelő hosszúságúra és úgy viselje a szem körüli területen. Állítsa be megfelelőre a szorosságot és helyezze a megfelelő pozícióba a viselési helyzetnek megfelelően, majd kapcsolja be a készüléket a masszázs élmény érdekében.

Használati lépések:

1) Nyomja meg hosszan, kb 2 másodpercig a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához (hangjelzés és a jelzőfény világítása jelzi). Az első bekapcsolásnál a vibrálás be lesz kapcsolva, az üzemmód a bekapcsoló gomb megnyomásával váltható. Bekapcsolt állapotban nyomja meg 2 másodpercig a bekapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához (hangjelzés kíséri és a jelzőfény kikapcsol).

2) A bekapcsoló gomb egyszeri megnyomásával válthat az üzemmódok között. A 4 üzemmód között ciklikusan válthat, melyet hangjelzés kíséri: „Vibrant mode (rezgő mód)”, „Soothing mode (nyugtató mód)”, „Sleep mode (alvó mód)” és „Eye exercises mode (Szem gyakorlat mód)”. Rezgő, nyugtató és alvó módban háttérzene kerül lejátszásra. A különböző üzemmódok különböző masszázstechnikákat jelentenek és mindegyik mód rendelkezik melegítő funkcióval.

3) A készülék üzemideje 15 perc (+/- 30 másodperc). Bekapcsoláskor a készülék elkezd a visszaszámlálást. 15 perc (+/- 30 másodperc) működés után automatikusan kikapcsol, melyet hangjelzés kíséri (alvó módban a kikapcsolást nem kíséri hangjelzés).

4) Mobiltelefonjával keresse meg a „S1511HB” Bluetooth eszközt. Az első csatlakozás alkalmával kézzel kell csatlakoznia az eszközhöz. A következő alkalommal a csatlakozás automatikusan megtörténik, ha a telefonon a Bluetooth kapcsolat be van kapcsolva. A sikeres csatlakozást a „Bluetooth connected” hangjelzés jelzi. Ha lecsatlakozik a telefon készülékkel a „Bluetooth disconnected” hangüzenet hallható. Ha a telefon Bluetooth kapcsolattal csatlakozik a készülékhez és a zene lejátszás elindításra kerül, a készüléken lejátszott zene leáll és a telefonról indított zene lejátszás lesz hallható.

5) Ha az akkumulátor energiaszintje alacsony, a „Low power” hangüzenet lesz hallható és a jelzőfény kékről narancs színre vált. Ha az energiaszint nagyon alacsony, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék kikapcsolásakor a kiválasztott masszázs üzemmód megjegyzésre kerül. Bekapcsoláskor az utoljára használt masszázs üzemmód lesz aktív. Az első bekapcsoláskor a rezgő mód lesz aktív.

KARBANTARTÁS

Ha a készülék felülete beszennyeződik, enyhén nedves ruhával törölje át. Ne használjon vegyszeres anyagot, pl alkohol. A készüléket ne szerelje szét és ne mártsa vízbe.



Ha hosszabb ideig nem használja takarja le a készüléket a porszennyeződés elkerülése érdekében.

A készülék tisztítása során ügyeljen rá, hogy víz vagy egyéb folyadék ne kerüljön a héj belsejébe, mert az rövidzárlatot okozhat.

HULLADÉK-KEZELÉS

Akkumulátor

Támogassa az akkumulátor újrahasznosítását (lithium-ion akkumulátor)

| | |
|---|--|
|  <p>Veszély</p> | <p>A készülék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne használja más termékben. Ne töltsen fel a kiszertelt akkumulátort</p> <ul style="list-style-type: none">• Ne dobja tűzbe vagy melegítse fel.• Ne szúrja meg tűvel, üsse meg vagy próbálja meg szétszerelni.• Ne okozzon rövidzárlatot fém érintkezéssel.• Ne tárolja nyaklánc vagy hajtű mellett.• Ne töltsen, használja vagy helyezze tűz közelébe, ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy egyéb magas hőmérsékletnek. <p>A fentiek melegegést, tüzet vagy robbanást okozhatnak</p> |
|  <p>Figyelmeztetés</p> | <p>A kiszertelt akkumulátort gyermekek által nehezen elérhető helyen tárolja.</p> <ul style="list-style-type: none">• Véletlen lenyelés esetén forduljon azonnal orvoshoz!• Az akkumulátorból szivárgó folyadékot ne érintse meg és az alábbiak szerint kezelje:<ul style="list-style-type: none">○ Ha az akkumulátorból szivárgó folyadék szembe kerül, az vakságot okozhat. Ne érintse meg a szemét közvetlenül a kezével. Mossa meg a szemét vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Ha a folyadék bőrrel vagy ruhával érintkezik, irritációt és sérülést okozhat. Mossa meg vízzel és ha a kellemetlen érzés megmarad, azonnal forduljon orvoshoz.○ Csak selejtezés esetén bontsa meg az akkumulátort, melyet csak szakember végezhet! Ellenkező esetben sérülést, áramütést és tüzet okozhat. Javítási igény esetén forduljon szakszervizhez. |

A készülékben használt lithium-ion akkumulátorok újrahasznosíthatóak és értékes erőforrások. Ha az akkumulátor elhasználódott adja át megfelelő szakértelemmel rendelkező szervezetnek újrahasznosításra.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülék hulladék-kezelése esetén.
- A készüléket áramtalanítani kell az akkumulátor eltávolítása előtt.
- Az akkumulátor eltávolításakor figyeljen a biztonsági előírásokra.